


# 還我一個小清新實驗室


出入在化學分析實驗室的各位，已經習慣了實驗室的solvent味、還是覺得刺鼻難受(想睡覺)呢？

有沒有發生過圖譜好像怪怪的、再現性不佳，卻又找不出原因呢？


## 安捷倫InfinityLab安全瓶蓋

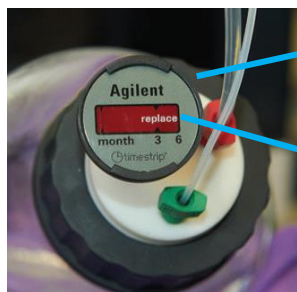

- ① 採用GL45標準設計，適用一般溶劑瓶，另提供不同尺寸的轉接頭
- ② 止逆閥允許氣體進入瓶內，阻止溶劑揮發出去；止逆閥內膜阻止雜質進入移動相內，確保溶劑穩定性
- ③ 止逆閥帶有時間標籤，提醒每半年更換一次

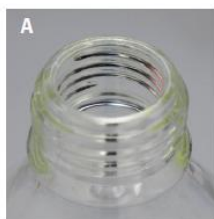

無蓋

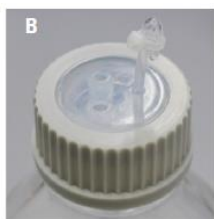

傳統溶劑蓋


以無蓋、傳統溶劑蓋、安全瓶蓋、實心蓋分別進行甲醇30天的揮發損失測試比較

使用安全瓶蓋30天後：

甲醇僅揮發了**0.3%**

與無蓋相比，甲醇揮發降低**98%**

與傳統溶劑蓋相比，甲醇揮發降低**85%**

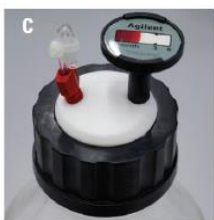

安全瓶蓋



實心蓋

Cap type	Loss of methanol	
	g	%
Open bottle	76.6	19.1
Standard cap	7.9	2.0
Agilent InfinityLab Stay Safe cap	1.2	0.3
Closed bottle	0.2	0.0

## 搭配一手就能握住的好好拿溶劑瓶



- ① 顏色標籤
- ② 清楚的體積標示
- ③ 符合人體工學曲線  
方便一手握住
- ④ 重覆黏貼書寫標籤
- ⑤ 125、500、1000mL

Part No.	Description	Fittings
5043-1217	GL45 with 1 port 1 vent valve with time strip (5043-1190)	1 x 3.2 mm
5043-1218	GL45 with 2 ports 1 vent valve with time strip (5043-1190)	2 x 3.2 mm
5043-1219	GL45 with 3 ports 1 vent valve with time strip (5043-1190)	3 x 3.2 mm
5043-1220	GL45 with 4 ports 1 leak hose	4 (2 x 3.2 mm, 1 x 2.3 mm, 1 x 1.6 mm)

更多詳細訊息請參考5991-7755EN